


Návod na obsluhu

Inteligentná osobná váha

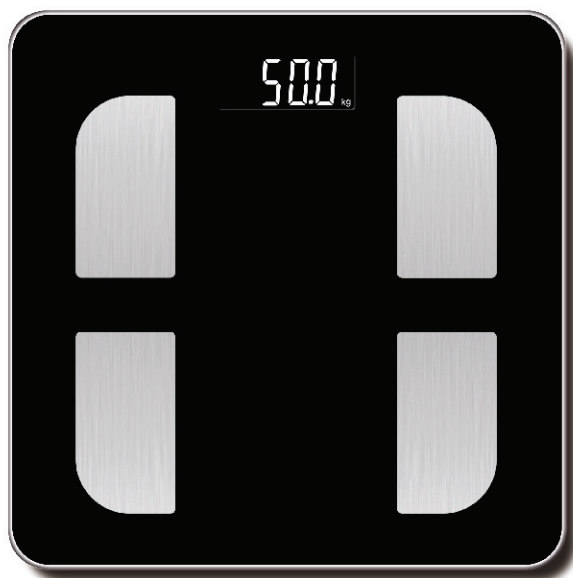

Pred použitím váhy si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu

1. Prvé použitie

Toto zariadenie je napájané pomocou troch AAA batérií, 1,5 V. Pred prvým použitím vytiahnite izolačnú fóliu z priestoru pre batérie. Ak vkladáte nové batérie, uistite sa, že sú vložené správnou polaritou a že kryt batérií je dobre zatvorený.



2. Kalibrácia

Ak váhu používate prvýkrát alebo ak ste ju premiestňovali vyžaduje sa kalibrácia. Váhu zapnite zatlačením na jej stred a počkajte, pokiaľ sa na displeji nezobrazí nula (0,0). Potom sa postavte na váhu a odvážte sa. Ak váha zostane na jednom mieste ďalšie nastavenia nie sú potrebné. Ak sa chcete opäť odvážiť jednoducho sa postavte na váhu.

3. Upozornenie

Ľudia s kardiostimulátorom alebo iným typom elektronických implantátov by nemali používať tento výrobok, pretože metóda merania môže narušiť jeho správnu funkciu. Tehotným ženám sa neodporúča používať tento výrobok na telesné analýzy. Tento produkt je vhodný pre dospelých a deti od 10 rokov.


Tipy na obsluhu a údržbu

- Váha má pamäť pre 8 používateľov
- Uistite sa, že je váha umiestnená na rovnom a pevnom povrchu. Vyhýbajte sa kobercom alebo mäkkým povrchom.
- Váha nie je vodotesná. Nevystavujte ju vlhkosti.
- Váhu čistíte jemne navlhčenou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak váhu nebudete dlhší čas používať vyberte z nej batérie.
- Deti sa s váhou nesmú hrať.




4. Popis

LCD displej

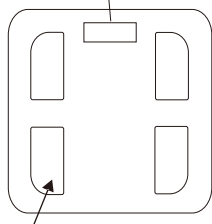

4 kovové elektródy

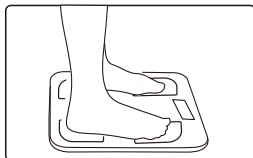

Vyzujte si topánky aj ponožky a udržiavajte dobrý kontakt medzi bosými nohami a kovovými elektródami.

5. Technické parametre

- 5-1. Maximálna hmotnosť: 200 kg / 440 lb / 31st: 7 lb
- 5-2. Minimálna hmotnosť: 5 kg / 11 lb
- 5-3. Presnosť váženia: 0,1 kg/0,2 lb/1 lb
- 5-4. Indikácia preťaženia: **Err**
- 5-5. Indikácia vybitých batérií: **Lo**
- 5-6. Impedančná chyba :**Err1** , riešenie nájdete v kapitole „12. Riešenie problémov“.
- 5-7. Počet používateľov v pamäti: 8 osôb
- 5-8. (**fat**) Meranie podielu telesného tuku: 5 % ~ 50 %
- 5-9. (**TBW**) Meranie podielu vody v tele: 10 % ~ 80 %
- 5-10. (**MUS**) Meranie podielu svalov v tele: 10 % ~ 80 %
- 5-11. (**BONE**) Meranie podielu kostí v tele: 0,5 kg ~ 8,0 kg
- 5-12. (**BMI**) Parameter indexu telesnej hmotnosti
- 5-13. (**KCAL**) Denná potreba kalórií
- 5-14. **Zapnutie**: Postavte sa na váhu, váha sa automaticky zapne.
- 5-15. **Automatické vypnutie**: Ak váhu dlhšie ako 10 sekundách nepoužívate, automaticky sa vypne.



6. Použitie s nižšie uvedenými operačnými systémami



iOS 8.0



Android 4.3

7. Aplikácia (AiFit)

Váha sa dá s aplikáciou spojiť pomocou Bluetooth. Aplikácia **AiFit** pre Android a iOS je k dispozícii v obchodoch Google Play (Android) a APP Store (iOS).



Aplikáciu „**AiFit**“ môžete nainštalovať aj naskenovaním QR kódu.


8. Poznámka

Váhu je možné spárovať s mnohými zariadeniami, ale výsledky sa môžu odosielať len jednému zariadeniu. Ak váhu používajú dvaja používatelia, nie je možné váhu pripojiť naraz k dvom aplikáciám. Ak chcete zvoliť druhého používateľa, prvý používateľ musí vypnúť aplikáciu aj bluetooth.

9. Prevádzkové pokyny

1. Zapnite Bluetooth v mobilnom telefóne / tablete. Váha môže zostať nečinná.
2. Spustíte aplikáciu. Zaregistrujte sa (e-mailová adresa, heslo) alebo sa prihláste, ak už máte vytvorený účet.
3. Aplikácia automaticky vyhľadá váhu, pripojí sa k nej a priradí ju k vášmu účtu. Vždy, keď váhu zapnete, aplikácia sa automaticky pripojí, ak je váha v blízkosti mobilného telefónu / tabletu.

10. Rozhranie

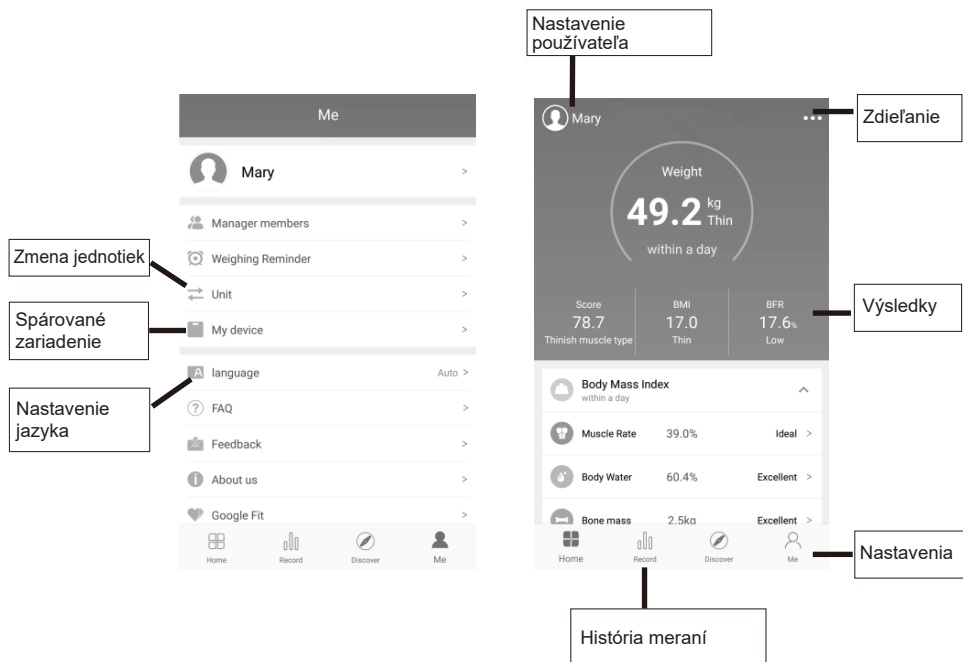

10-1. Nastavenie používateľa

V nastaveniach používateľa môžete pridať profily a upraviť ich. Každý profil má svoju vlastnú históriu meraní. Váha dokáže identifikovať 8 používateľských profilov.

10-2. História meraní

V histórii meraní si môžete prečítať všetky predchádzajúce merania uložené v profile. Zároveň si môžete prezerat' priemery z každého parametra.

10-3. Nastavenia

Nastavenia aplikácie vám umožňujú prispôsobiť aplikáciu vlastným potrebám: Prevod jednotiek (kg / lb / st), Pripomenutie váženía, pripojenie váh (Bind alebo Unbind), aktualizáciu systému, nastavenie jazyka, atď.



Poznámka

Váha zobrazí všetky údaje až po prvom spárovaní s mobilnou aplikáciou.


11. Ako používať váhu

11-1. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte používateľa, nastavte informácie o používateľovi a pripojte váhu, ak je zapnutá.


11-2. Po ukončení nastavení v telefóne, si vyzujte topánky aj ponožky a odvážte sa. Zabezpečte dobrý kontakt medzi bosými nohami a kovovými elektródami. Po ukončení váženia sa váha automaticky vypne.

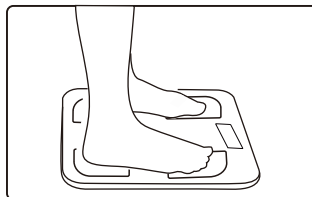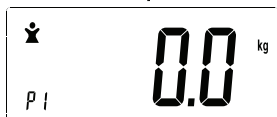


11-3. Počkajte, pokým sa údaj o hmotnosti stabilizuje. Zostaňte stáť na váhe, pokým sa nezobrazia všetky hodnoty.

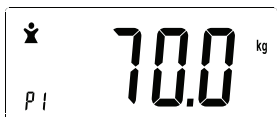

11-4. Po chvíli merania zmiznú štyri „0“ postupne zľava doprava. Počkajte, pokým sa nezobrazia ďalšie hodnoty.

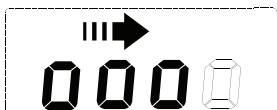

11-5. Merania sa zobrazia postupne. Teraz môžete odstúpiť z váhy. Na LCD displeji sa zobrazí telesná hmotnosť, BMI, percento telesného tuku, percento vody, percento svalov, percento kostí, odporúčané kalórie a potom opäť hmotnosť. Výsledky sa na displeji LCD zobrazia dvakrát.

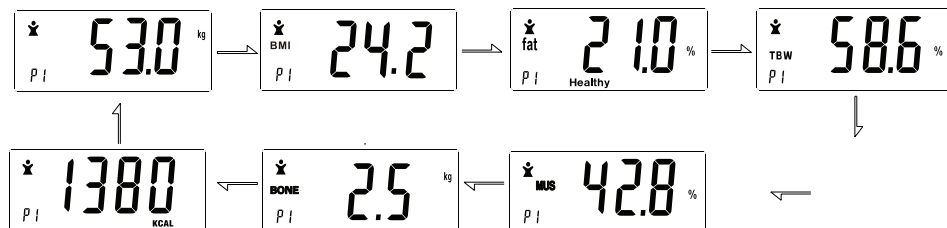

12. Riešenie problémov

Ak pri používaní váhy narazíte na akýkoľvek problém, pred kontaktovaním servisného strediska si najskôr prečítajte informácie v nasledujúcej tabuľke.

Problém	Príčina	Riešenie
Váha sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte batérie.• Hmotnosť pod 5 kg.	<ul style="list-style-type: none">• Ak sa vo váhe nenachádzajú batérie vložte ich. Skontrolujte či sú batérie vložené správne.• Minimálna merateľná hmotnosť je 5 kg.
Na displeji sa zobrazí Lo.	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie.
Na displeji sa zobrazí Err.	Bola prekročená maximálna možná hmotnosť.	Maximálna prípustná hmotnosť je 200 kg.
Na displeji sa zobrazí Err1.	Váha má problémy pri meraní množstva tuku v tele pomocou kovových elektród a nôh.	<ul style="list-style-type: none">• Zaistite, aby vaše bosé nohy boli v dobrom kontakte so všetkými 4 elektródami.• Meranie uskutočňujte bosí. Vyzujte si obuv aj ponožky.• Ak sú vaše nohy veľmi suché, mierne ich navlhčite.• Odstráňte z chodidla všetky zhrubnuté časti pokožky.
Chyba pri meraní hmotnosti.	<ul style="list-style-type: none">• Váha nie je umiestnená na rovnom povrchu.• Skontrolujte zvolenú jednotku merania.• Vykonajte kalibráciu.	<ul style="list-style-type: none">• Váha musí byť umiestnená na rovnom a pevnom povrchu. Vyhýbajte sa kobercom a iným mäkkým povrchom.• V aplikácii nastavte správnu jednotku, kg / lb / st.• Kalibrácia: Pritlačením na stred váhy, váhu aktivujete, počkajte asi 10 sekúnd, pokým číslice „0,0“ nezmiznú z LCD displeja. Viac informácií nájdete v kapitole „2. Kalibrácia“.
Aplikácia sa nespojila z váhou.	Medzi váhou a mobilným telefónom je problém s pripojením Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je zapnutá funkcia Bluetooth.• Skontrolujte, či sú vo váhe vložené batérie a či sú funkčné.• Vypnite iné zariadenie Bluetooth.• Pamätajte, že k váhe je možné pripojiť len jedno zariadenie.• Zatvorte aplikáciu a Bluetooth v iných zariadeniach, ktoré váhu používajú.